

TERMOMETRO DIGITALE

GT-302



Auge S.r.l. Vi ringrazia per aver scelto i suoi prodotti ed in particolare il termometro digitale GT-302 con display LCD, maneggevole facile da utilizzare, rileva la temperatura corporea attraverso una lente che viene posta nel padiglione auricolare dell'orecchio. Adatto a tutti, ma soprattutto per i bambini, le persone anziane e per infermi e disabili.

COME SI ADOPERA

Togliere il cappuccio di protezione lente, installare un filtro (scatola contenente 20 filtrini) e accendere tramite il tasto ON. Nel display appare la figura dell'orecchio con il pesce e la °C significa che è pronto per la misurazione della temperatura. Appoggiare leggermente l'imbuto del termometro all'interno dell'orecchio, premere il tasto MASURE un beep confermerà l'avvenuta rilevazione. A questo punto sul display si leggeranno i gradi centigradi rilevati.

Il termometro ha una memoria fino a 16 locazioni in sequenza. Per memorizzare la temperatura appena rilevata basta premere il tasto MEM, la misura viene subito memorizzata.


La procedura per richiamare le 16 memorie viene effettuata accendendo il termometro mantenendo costantemente premuto il tasto ON. Le 16 memorie vengono visualizzate consecutivamente dalla 1 alla 16 fin quando il tasto è premuto. L'ultima misura memorizzata è la numero uno.

Riporre il GT-302 sempre nel proprio astuccio, tenerlo possibilmente in un luogo asciutto, non troppo caldo e nemmeno troppo freddo. Non immergere il termometro nell'acqua e nemmeno metterlo a contatto diretto su fonti di calore tipo fuoco.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Il termometro GT-302 viene alimentato da due batterie mini stilo tipo "AAA" da 1,5 V alcaline che si trovano sotto al coperchio. Sostituire le batterie con altre nuove con le stesse caratteristiche, non inserire mai batterie mezze cariche o batterie al zinco carbone. Fare attenzione alla polarità, per non sbagliare seguire il disegno che vi è riportato nel vano porta batterie.

DESCRIZIONE

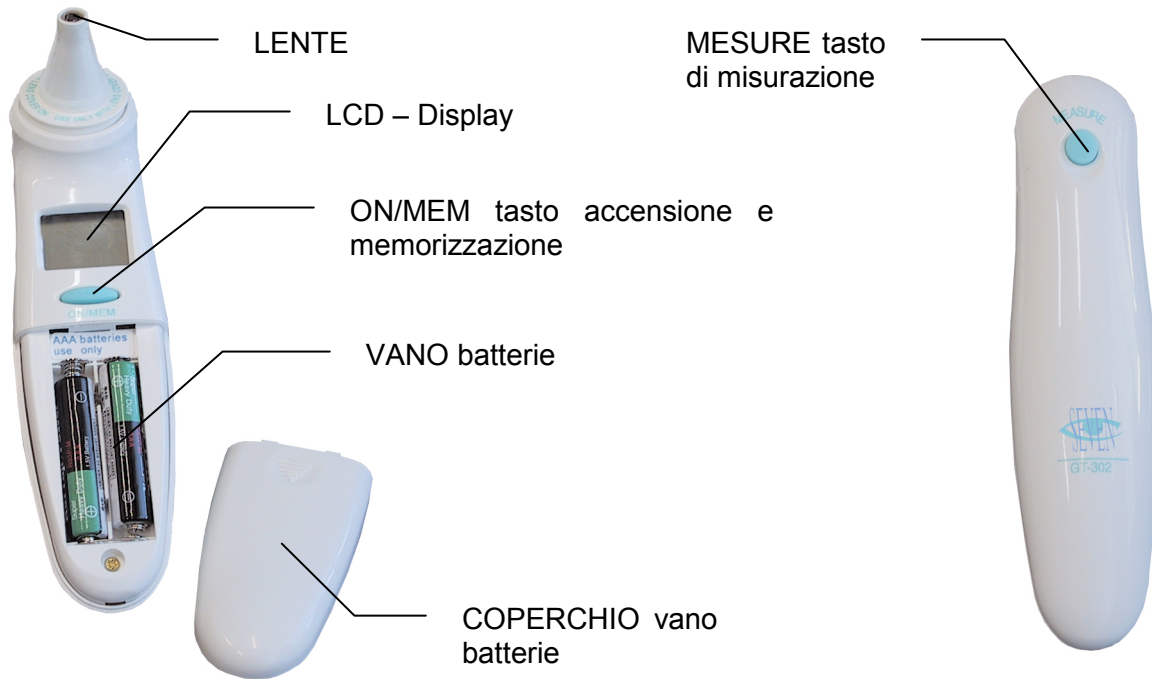

VISUALIZZAZIONE DI ERRORE

AH / AL = se nel display appare una delle due scritte, significa che l'ambiente in cui si trovava il termometro è troppo alta o troppo bassa. **RIMEDIO:** portare il termometro in una stanza dove la temperatura sia tra i 14°C / 36°C, aspettare circa 30 minuti perché ritorni a temperatura ambiente.

HI / LO = se nel display appare una delle due scritte, significa che non è una temperatura corporea umana (il campo di lettura è 34°C/43°C). **RIMEDIO:** assicurarsi che il filtro della lente sia inserito bene, inserire il termometro nell'area dell'orecchio e procedere ad una nuova misurazione della temperatura.

ERROR I = se nel display appare questa scritta è un errore nelle procedura del test. **RIMEDIO:** spedire il termometro all'assistenza tecnica per la riparazione.

INDICAZIONE BATTERIA = il voltaggio della batteria è basso. **RIMEDIO:** sostituire le batterie.

AVVERTENZE

Mantenere l'apparecchiatura in ambienti a temperatura costante. Temperature particolarmente elevate o basse, così come gli sbalzi, possono danneggiare ed incidere sulla vita delle parti elettroniche. Maneggiare con attenzione il dispositivo. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e morbido rimuovendo la polvere e senza utilizzare alcun prodotto chimico.

GARANZIA E INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali, per il periodo previsto dalle norme vigenti a partire dalla data d'acquisto.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per questo è stato progettato.

La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti.

Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato.

Nessun eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.